

25 couleurs sont disponibles:



1 rouge vif

2 jaune vif

3 bleu vif

4 vert vif

5 rose vif

6 bleu clair

7 transparent

8 rouge foncé

9 bleu nuit

10 maroon

11 vert foncé

12 blanc pur

13 noir profond

14 or

15 argent

16 camouflage

17 lava

18 tie-dye

19 rainbow

20 confetti

21 zebra

22 goldflakes

23 silverflakes

24 camouflage
strip

25 lava strip

Cocher la couleur désirée:

Différences de couleur possibles


Playsafe 4u

Libre individualisation de votre Playsafe triple



Playsafe triple protège-dents en jusqu'à **4** couleurs!
Vous pouvez composer votre protège-dents multi-coloré des couleurs **1 à 15**
Pour cela veuillez indiquer les numéros des couleurs:

Exemple: →

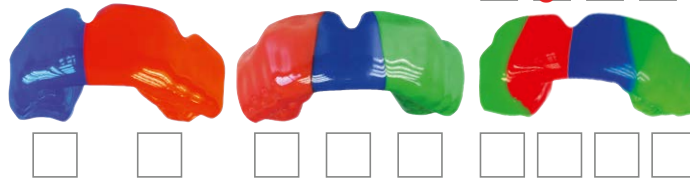

Veuillez cocher le type Playsafe triple désiré:

PLAYSAFE® triple + **PLAYSAFE® triple-light**



Playsafe triple et triple light sont appropriés pour tous les sports.

Playsafe triple light est approprié pour des proportions de bouche petites.

Recommandé par 'Verband der Deutschen Boxringärzte e.V.'

Chère sportive, cher sportif, chaque protège-dents Playsafe est fabriqué pour vous d'une façon personnalisée selon les règles Playsafe.

Vous obtiendrez votre protège-dents Playsafe dans votre cabinet dentaire. Là une empreinte de votre mâchoire supérieure et inférieure sera prise.

Chez le laboratoire dentaire le modèle en plâtre et le protège-dents seront réalisés.

Le contrôle de l'adaptation et la remise aura de nouveau lieu dans le cabinet dentaire.

Un protège-dents Playsafe triple original est toujours laminé (c'est-à-dire constitué d'au moins deux couches) et porte le nom Playsafe triple, le nom du sportif et l'indication du type.

Votre équipe Playsafe triple:

ERKODENT®

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler
Allemagne • Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15
info@erkodent.com • www.erkodent.com
EN ISO 13485:2016 • ISO 9001:2015

PLAYSAFE® triple

Protège-dents



CE Le premier protège-dents fabriqué individuellement avec examen CE de type réussi



ERKODENT®



Pourquoi des protège-dents Playsafe triple fabriqués individuellement?

Le protège-dents Playsafe triple s'applique exactement sur l'alignement des dents, ne bouge pas, permet de respirer librement et de parler normalement.

Les protège-dents ne sont pas tous égaux!

Des protège-dents Boil & Bite (bouillir et mordre) s'appliquent de mauvaise façon et ne restent pas en place.

Le sportif doit tenir le protège-dents sur l'alignement des dents et pour cela il est gêné dans son activité.

Protège dents Boil & Bite

Beaucoup d'études scientifiques montrent qu'un protège-dents Boil & Bite donne un faux sens de protection en raison d'une importante perte de l'épaisseur (coupé avec les dents) pendant l'adaptation dans la bouche.

Le premier protège-dents fabriqué sur mesure avec marquage CE pour prouver la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé pour des équipements de protection individuelle, règlement UE 2016/425 (annexe II):

Protège-dents à 3 - couches

PLAYSAFE® triple-light

flexible avec couche intermédiaire dure:



▷ dur ▷ mou, flexible

Playsafe triple (-light) est approprié pour tous les sports.

La couche intermédiaire dure comprend la protection complète.

Meilleure protection avec extension minimale!

(épaisseur totale Playsafe triple 5,5 mm, Playsafe triple light 4,1 mm)

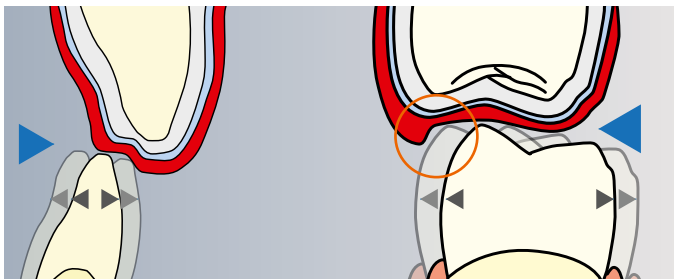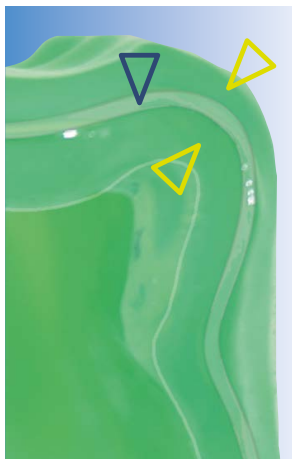

Playsafe triple (-light) montre un ► "buccal shield" (bouclier buccal) malgré la liberté de mouvement pour l'antagoniste. Ce listeau de protection périphérique (circle orange) évite des déviations trop grandes de la mâchoire inférieure en cas des chocs heurtant latéralement.



Tests: Des stress tests intensifs font preuve de l'effet de protection supérieur des types Playsafe triple protège-dents.

Résistance à déformation et test pendulaire des chocs pour mesurer l'absorption et répartition de force.



... à propos, chaque protège-dents Playsafe triple peut être adapté à une dentition changeante.

https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix_FR_web.pdf

